

Pripremite se za lako slojevanje kompozita

pomoću GC Modeling Liquid i Gradia četkica



012244 - GC Modeling Liquid, dopuna 6 ml EEP

001533 - GC GRADIA, zaobljena četkica, n°1 x10

001534 - GC GRADIA, pljosnata četkica, n°1 x10

001535 - GC GRADIA, držač četkica x2

900744 - GC Composite Modeling Kit EEP

Uključuje GC Modeling Liquid,
Gradia pljosnatu četkicu (x 5), Gradia zaobljenu
četkicu (x 5), Gradia držač za četkice (x 2) i
podloge za mešanje.

Otkrijte spoj izvrsnog rukovanja i estetike

s GC kompozitima u pasti



Gradia Direct Anterior / Posterior / X



G-aenial Anterior / Posterior



Essentia

GC EUROPE N.V.
Head Office
Researchpark
Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33
B-3001 Leuven
Tel. +32.16.74.10.00
Fax. +32.16.40.48.32
info@gceurope.com
www.gceurope.com

GC EUROPE N.V.
GCEEO Serbia
Dimitrija Tucovića 119, 6th floor, ap.35
RS - 11000 Beograd
Tel. +381.11.24.05.419
Fax. +381.11.24.05.419
Mob. +381.63.78.82.777
serbia@eoo.gceurope.com
www.eoo.gceurope.com

GC

z O LF 8 82 RS 03/18



Nanesi, oblikuj,
zagladi,
uživaj!

Kompoziti
za slojevanje
odsad
jednostavniji

uz GC Modeling Liquid
i GC četkice

GC

Pojednostavnite kompozitne radove tehnikom četkice

Izrada direktnih kompozitnih radova može da bude zahtevna: ponekad se zalepe na instrumente, ili se teško oblikuju i zaglađuju na način kako želite, a ponekad se završi s vidljivim ivičnim linijama...

Nanošenje kompozita pomoću četkice i tečnosti za modelovanje zaista pravi razliku.



Brzina i jednostavnost
nanošenje i oblikovanje

Korišćenje četkice umočene u tečnost za modelovanje čini kompozite manje lepljivim pa omogućava lakše i brže nanošenje i oblikovanje.



Zaglađenost
za kraću završnu obradu

Nanošenje završnog sloja natopljenom četkicom takođe omogućava dobro zaglađivanje i postizanje vrlo lepe površine. **Pojednostavljuje završnu obradu** i šteti dragoceno vreme.




Nevidljivost
za najbolje estetske rezultate

Iako blago žučkast tokom nanošenja, GC Modeling Liquid postaje **potpuno transparentan nakon svetlosne polimerizacije** - i garantuje najbolje estetske rezultate.



GC Modeling Liquid je savršen akrilat za vlaženje za tehniku četkicom:

- Optimalna niska viskoznost
- **Nevidljiv** nakon svetlosne polimerizacije
- Jednostavan postupak, koji štedi vreme
 - 350 kapi u bočici za 350 ispuna!
- Kompatibilan sa **svim direktnim kompozitima**
- Čuvanje na **sobnoj temperaturi**

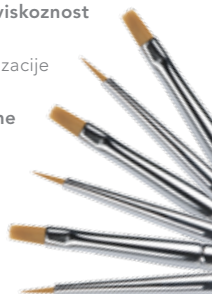

Slike ustupio dr. Javier Tapia Guadix (Španija) i Prof. Marleen Peumans (Belgija); kompozit: Essentia (GC)

Zbogom zahtevnim kompozitima Nanesi, oblikuj, zagladi, uživaj!



Dozirati jednu kap GC Modeling Liquid na podlogu.



Koristiti je brzo i poklopcem zaštititi od svetla.



Dodirnuti kap četkicom i navlažiti je.



Viškove temeljito odstraniti papirnatom maramicom.



Koristiti pljosnatu četkicu za izradu palatinalne gledne fasete.



Zaobljena četkica može da bude korisna za izradu aproksimalnog dela.



Pljosnatom četkicom naneti dentinsku pastu.



Dentinske linije sazrevanja modelovati zaobljenom četkicom.



Dentinske linije sazrevanja modelovati zaobljenom četkicom. Zahvaljujući četkici, završni sloj imaće glatku površinu.

Takođe optimalno za područja pozadi

Zaobljena četkica olakšava izradu kvržica i redefinisane fisura.



Četkica se lako može saviti za lakši pristup pozadinskim područjima.



Četkica se može koristiti za nanošenje materijala kvržicu po kvržicu.



Optimalno za redefinisane fisura i fino anatomsko oblikovanje.